


MED CONTROL

LENTE HIDROFÍLICA TRIMESTRAL

Lente de contacto hidrofílica de reemplazo TRIMESTRAL para la **corrección de miopía en niños y adolescentes.**

Diseñada específicamente para el control de la progresión de la miopía a través de un desenfoque miópico en la retina periférica creado por una multifocalidad perimetral de la zona óptica (+2.50 D).

El rendimiento central de lejos permanece sin cambios en comparación con una lente monofocal. Máximo confort gracias al borde extremadamente fino y redondeado.

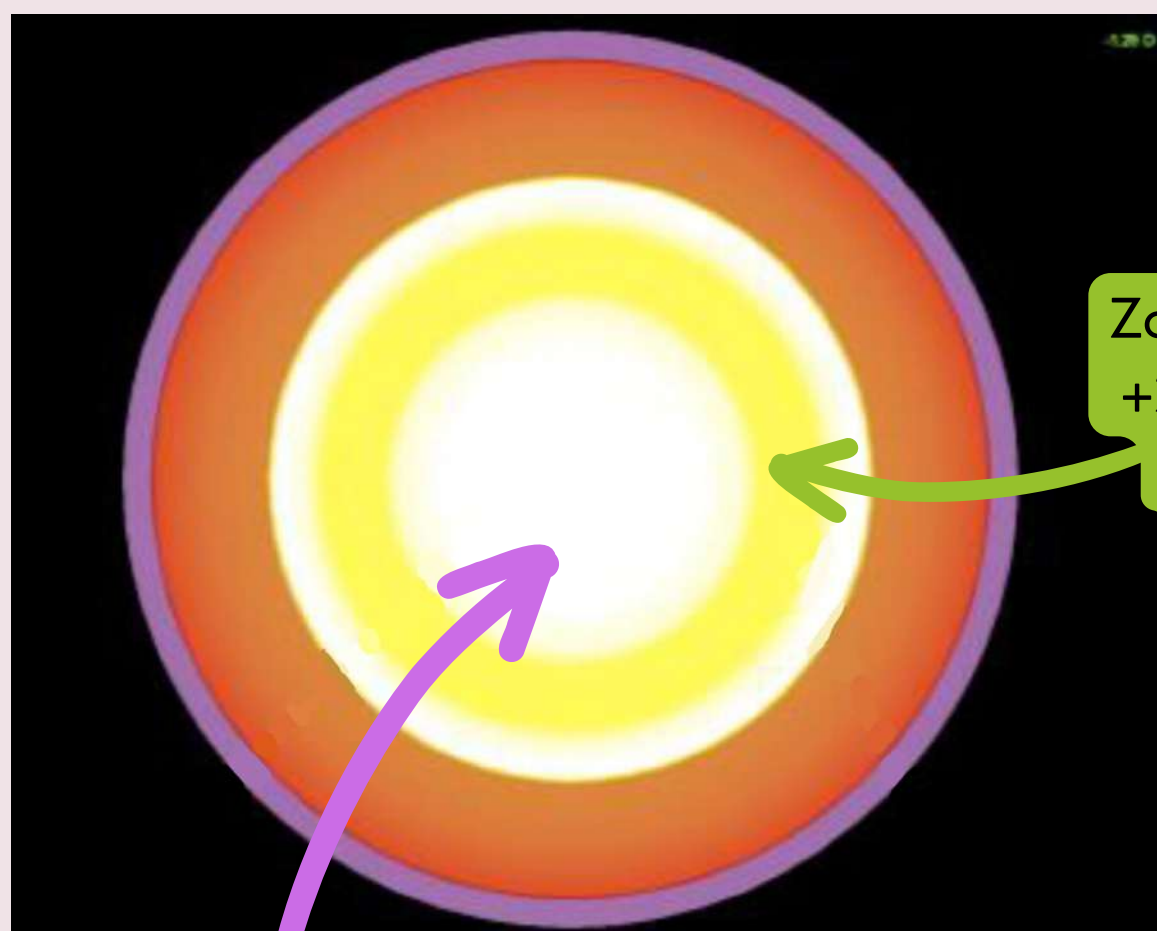

Zona de adición
+2.50D para el
desenfoque
periférico

Zona de lejos >3.5 mm.

ESPECIFICACIONES

TORNEADO	Sub-Micrométrico
REEMPLAZADO	Trimestral
GEOMETRÍA	Biasférica con compensación de aberraciones
MATERIAL	Hidrogel Silicona Definitive 74 (Dk/t 75 uds / 74 % H2O)

RADIO BASE

7,30 a 9,50 mm.
Pasos 0,05 mm.

-0,25 a -8,00 D
Pasos 0,25 D

CILÍNDRICO

DIÁMETRO

13,40 a 15,20 mm.
Pasos 0,10 mm.

ESFERA

±30,00 D
Pasos 0,25 D

0° - 180°
Pasos 1°

EJE

(El radio y diámetro se calculan específicamente para cada paciente)

Indicar el valor de la **POTENCIA**, **QUERATOMETRÍA** y el **DIÁMETRO CORNEAL** a PauneVision para el cálculo de la lente.